




## Würdevoll und diskret.

Lösungen zum Weglaufschutz von Ascom teleCARE IP

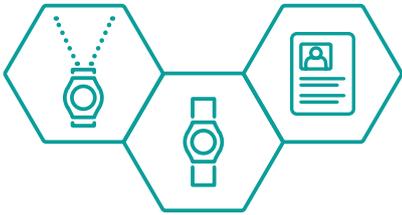

- Diskrete Überwachungs- und Alarmlösung, um die Würde und Unabhängigkeit der Bewohner zu erhalten.
- Vermeidet aufdringliches Monitoring.
- Sichere Mobilität in einer kontrollierten Umgebung.
- Hält Daten für Audits zur Verfügung und trägt zur Sicherung der Versorgungsqualität bei.
- "Loitering-Alarme" werden ausgelöst, wenn sich gefährdete Bewohner über eine voreingestellte Zeit hinaus in der Nähe bestimmter Ausgänge befinden.

Ascom teleCARE IP hat sich weltweit als Lösung zum Weglaufschutz von desorientierten Bewohnern und Patienten bewährt. Durch den Einsatz von mobilen Transpondern und LF-Lokatoren ist es möglich, das mobile Personal im Gefahrenfall umgehend zu alarmieren und falls erforderlich, Ausgänge abzusichern. Im Falle eines zu langen Aufenthalts in unerlaubten Bereichen wird ein spezieller "Loitering Alarm" ausgelöst.

Der mobile Transponder ist für die Bewohner als Amulett oder Armband tragbar. Das Armband kann bei Bedarf sicher befestigt werden. Es verfügt über einen Manipulationsalarm und wird oft für Menschen mit fortgeschrittener Demenz bevorzugt eingesetzt. Die mobilen Transponder lassen sich zur besseren Unterscheidung farblich codieren und sind mit einer 'No-Motion' Funktion ausgestattet. So wird bei Nichtbewegung nach einer vordefinierten Zeit sofort das verantwortliche Personal alarmiert.

### Teil einer Gesamtlösung

Die Lösung zum Weglaufschutz ist Teil des Ascom Rufsystems und bedarf keiner separaten Installation. Alle Alarmer können auf Mobilgeräte, wie das Ascom Myco 3, gesendet werden, die auch für andere Funktionen innerhalb des Rufsystems im Einsatz sind.


Durch das direkte Senden von Alarmen an die Mobilgeräte des zugewiesenen Personals, kann eine ruhigere Umgebung geschaffen werden und Alarmmüdigkeit vermieden werden. Eine ruhigere Umgebung schafft außerdem positive Effekte auf das Wohlfühlverhalten der Bewohner und Patienten, da eine laute Atmosphäre mit vielen störenden Alarmgeräuschen nicht förderlich für Demenzpatienten ist und sogar das Ausbrechen/Umherirren auslösen kann.<sup>1</sup>



## Massgeschneiderte und automatisierte Alarmbenachrichtigungen

Die Funktionalitäten und Leistungsmerkmale können an bestehende und/oder geplante Infrastrukturen und Systeme angepasst werden.

Die Weglaufschutz/Loitering Funktionen lassen sich so konfigurieren, dass sie jede Art und Größe von Senioreneinrichtungen bedienen und auch an spezifische Bedürfnisse der einzelnen Bewohner angepasst werden können.

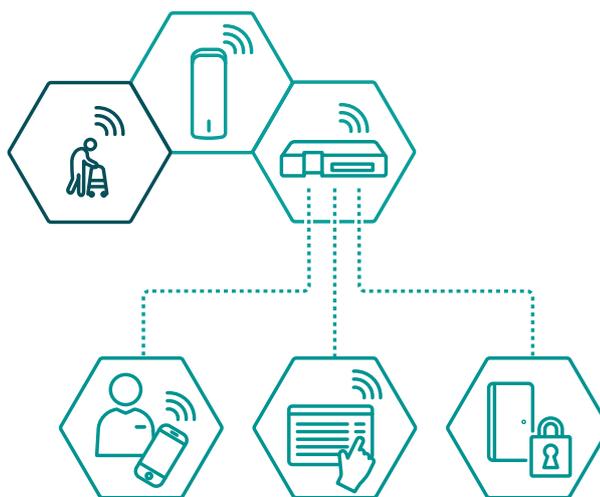

Die Demenzalarme können auf das gleiche Gerät gesendet werden — z.B. ein Ascom Myco 3 Smartphone — welches das Personal auch für andere koordinierende Aufgaben nutzt. Damit kann für eine ruhigere Pflegeumgebung gesorgt werden.

### Ascom Deutschland GmbH

Kruppstraße 105,  
60388 Frankfurt  
T +49 69/580 057-0  
F +49 69/580 057-333  
www.ascom.de

### Ascom Solutions AG

Gewerbepark  
CH-5506 Mägenwil  
T +41 62 889 50 00  
F +41 62 889 50 99  
www.ascom.ch

### Ascom Deutschland GmbH

Niederlassung Österreich  
Liebermannstraße 201/202/F15,  
2345 Brunn am Gebirge  
T +43 1 3439550-0  
F +43 1 3439550-33  
www.ascom.at

1. Alzheimer's Australia (2016) Wandering [online] available from  
<<https://fightdementia.org.au/national/support-and-services/carers/behaviour-changes>> [20 May 2019]

Mehrere Produkte von Ascom und Drittanbietern unterstützen die beschriebenen Funktionen und Merkmale. Nicht alle Ascom-Lösungen sind weltweit verfügbar.